



BARRIERE DE LIT ESCAMOTABLE

ADJUSTABLE BEDRAIL

REF 823002

The French flag is represented by three vertical bars: blue on the left, white in the middle, and red on the right.

NOTICE D'INSTRUCTIONS FR


Cette barrière de lit est principalement utilisée pour des personnes âgées ou enceintes, car elle fournit un support stable pour entrer et sortir du lit facilement.

Avertissement:

1. Poids maximum de l'utilisateur : 150 kg
Ne pas dépasser la limite de poids indiquée, car cela pourrait mettre l'utilisateur en danger.
2. Avant d'utiliser la barrière de lit, veuillez l'examiner attentivement pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée ou défectueuse et lire attentivement le manuel. Si vous suspectez un défaut ou un dommage, ne l'utilisez pas et contactez immédiatement votre fournisseur.
3. Ne l'utilisez pas sans matelas ou si l'épaisseur du matelas est inférieure à 10CM.
4. Nettoyer régulièrement avec un chiffon doux et ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.


Instructions de montage:

Étape 1: Cette barrière de lit peut être placée des deux côtés du lit. Dans cette figure, la barrière de lit est montée sur le côté gauche du lit.

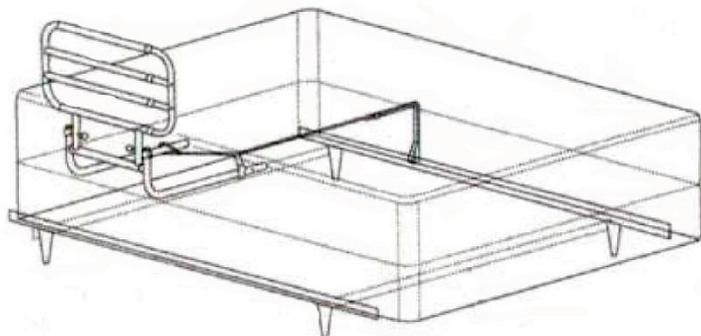

Étape 2: Sortir toutes les pièces de la boîte et les placer sur une surface plate.

Étape 3: Vérifiez attentivement que toutes les pièces sont incluses dans le carton.

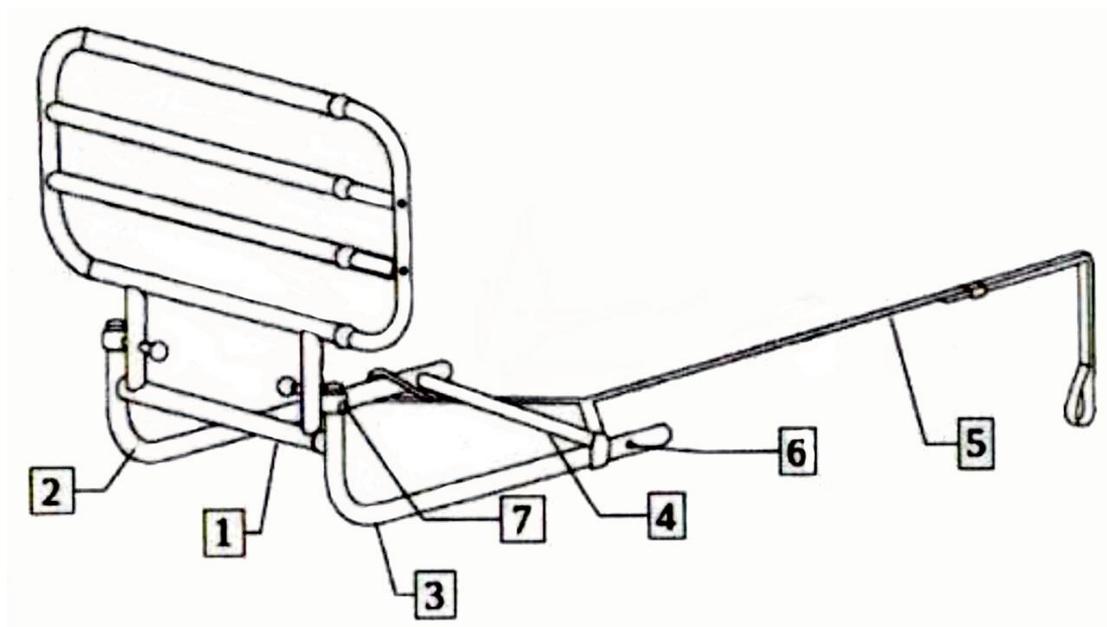

- 1) Structure principale
- 2) Tube en forme de L
- 3) Tube en forme de L
- 4) Barre transversale
- 5) Barre de sécurité
- 6) Vis
- 7) Rondelles

Étape 4: Fixer les tubes en L (2&3) à la structure principale (1) à l'aide des vis et des rondelles (6&7).

Étape 5: Après cela, placez la ceinture de sécurité (5) dans les tubes en forme de L (2&3), comme indiqué sur l'image. Veillez à ce que les rubans de la ceinture de sécurité se trouvent devant la barre transversale (4) afin qu'ils ne glissent pas.

Étape 6: Finalement fixer la barre transversale (4) avec les vis (6) et les rondelles (7) à chaque barre.

Caractéristiques techniques

Matériau	:	Acier
Longueur réglable	:	67cm à 107cm
Hauteur	:	58cm




INSTRUCTIONS MANUAL EN

Warning:

1. Maximum user weight: 150kg weight limit
Do not exceed the weight limit stated as doing so could put the user at risk
2. Please examine fully for any damage or faults and read the manual carefully before using the bed rail. If you suspect a fault or damage, do not use and contact your supplier immediately.
3. Do not use it without any mattress or the thickness of mattress less than 10CM.
4. Clean regularly with soft cloth and do not use abrasive cleaners.


Assemble instructions:

Step 1: This bedrail can be placed on both sides of the bed. In this figure, the bed rail is showed on the left side of the bed.

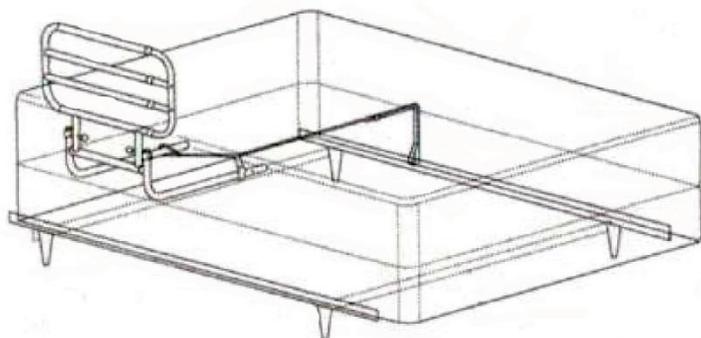

Step 2: Remove all parts from the box and place them on a flat surface.

Step 3: Carefully check that all parts are included in the carton.

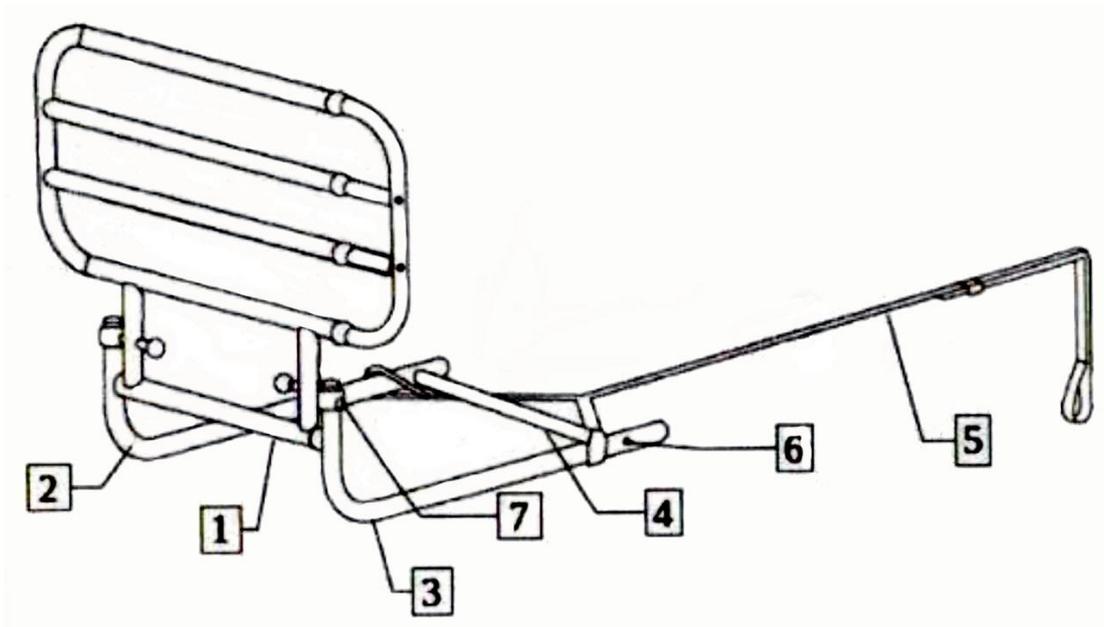

- 1) Main structure
- 2) L shaped tube
- 3) L shaped tube
- 4) Transversal bar
- 5) Security bar
- 6) Screws
- 7) Washers

Step 4: Secure the L shaped tubes (2&3) with screws and washers (6&7) to the main structure (1)

Step 5: After that, place the security belt (5) in the L shaped tubes (2&3), as shown in the picture. Make sure the tapes of the security belt are in front of the transversal bar (4) so that they won't slip.

Step 6: Finally fixed the transversal bar (4) with the screws (6) and washers (7) to each bar

Technical Specifications

Material	:	Steel
Adjustable length	:	67cm to 107cm
Height	:	58cm